

# Quel autoclave MELAG vous convient le mieux?

Découvrez notre large gamme de petits autoclaves.




Points forts du produit	Pro Line	Prime Line	Premium-Classe	Vacuclave 550
<b>Écran Smart-Touch :</b> pour une utilisation intuitive	4.3"	4.3"	5.7"	7.0"
<b>Taille des chambres :</b> pour vos besoins individuels	17 – 23 litres	17 – 23 litres	18 – 23 litres	53 litres
<b>Capacité maximale :</b> pour le chargement d'instruments individuels	Jusqu'à 6 kg	Jusqu'à 8 kg	Jusqu'à 9 kg	Jusqu'à 25 kg
<b>Nombre de plateaux :</b> pour une utilisation efficace de la chambre de stérilisation	5 pièces	5 pièces	8 pièces	16 pièces
<b>Nombre de boîtes de stérilisation :</b> pour le chargement des boîtes MELAstore	3x boîte	3x boîte	4x boîte	10x boîte
<b>Durée du cycle :</b> pour un processus de stérilisation (sans séchage)*	15 – 31 min.	15 – 31 min.	8 – 21 min.	12 – 43 min.
<b>Fonction d'économie d'énergie :</b> pour désactiver le chauffage et l'affichage entre les processus de stérilisation	✓	✓	✓	✓
<b>Mesure de la conductivité :</b> Pour le contrôle automatique de la qualité de l'eau	✓	✓	✓	✓
<b>Interfaces de documentation intégrées :</b> Pour le stockage des données via le réseau ou le support de données	✓	✓	✓	✓
<b>ProControl :</b> Approbation par lots et authentification des utilisateurs directement sur l'appareil	✗	✓	✓	✓
<b>Impression d'étiquettes à code-barres :</b> Utilisation d'une imprimante d'étiquettes en option	✗	✓	✓	✓
<b>DRYtelligence :</b> Pour des résultats de séchage optimaux et une réduction du temps de séchage jusqu'à 80%	✗	✓	✓	✓
<b>Présélection de l'heure de démarrage :</b> Pour un démarrage automatique du programme à l'heure souhaitée	✗	✗	✓	✗
<b>Cycles de maintenance :</b> Pour assurer la qualité à long terme	2 000 cycles ou 2 ans	2 000 cycles ou 2 ans	4 000 cycles ou 2 ans	4 000 cycles ou 2 ans

\* Durée de la charge minimale à la charge maximale dans le programme Quick-S to Universal-B

Rev.0-23/1579-05-23-FR-ME



**Vous avez des questions ? Nous avons les réponses !** Prenez- rendez-vous avec notre équipe de vente dès aujourd'hui : [www.melag.com](http://www.melag.com)

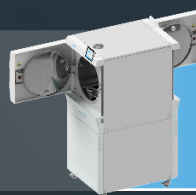

## Besoin d'une plus grande capacité ?

La série Cliniclave 45 est faite pour vous. Avec un volume de chambre de 100 et 200 litres, disponible avec porte simple ou double.



# Le guide de l'autoclave MELAG :

Nos solutions pour la stérilisation à la vapeur selon la norme EN 13060

## Pro Line

Nos modèles d'entrée de gamme : Quelle que soit votre journée, le Vacuclave 118 et le Vacuclave 123 vous apporteront la tranquillité d'esprit dont vous avez besoin dans la salle de retraitement.



### Maximum fiabilité :

Grâce à la qualité unique de MELAG - Made in Germany



### Concept d'utilisation intuitif :

Grâce à l'écran Smart-Touch avec documentation intégrée



### Un excellent soutien :

Grâce à votre contact direct et à nos outils numériques



## Prime Line

Nos champions du rapport qualité-prix : Vacuclave 318 et Vacuclave 323 combinent les atouts de la gamme Pro avec d'autres innovations pour des performances accrues, des résultats de séchage exceptionnels et une traçabilité des lots.:



### Capacité de chargement élevée :

Avec le programme Heavy-Duty Programme jusqu'à 8 kg sur 5 plateaux



### Temps de cycle rapides :

Grâce au système de séchage contrôlé par algorithme DRYtelligence.



### Traçabilité complète :

Avec authentification des utilisateurs, approbation des lots et impression d'étiquettes avec MELAprint 80



## Classe Premium

La référence pour une efficacité maximale : La série Evolution est plus rapide que jamais. Grâce à la technologie de la double enveloppe, vous pouvez stériliser deux fois plus vite.



### Des temps de cycle record :

Grâce à la technologie brevetée de la double enveloppe



### Les capacités de chargement les plus élevées :

Jusqu'à 9 kg d'instruments sur 8 plateaux



### Composants haute performance :

Pour les utilisateurs intensifs avec des cycles de maintenance prolongés